

フレキシブル鉗子

「セルメン」


210mm

把持鉗子 HK1.2 / 生検鉗子 SE1.5


細いのにフレキシブルに
曲げて確実に患部をとらえます！

115mm

把持鉗子 HK1.2-S

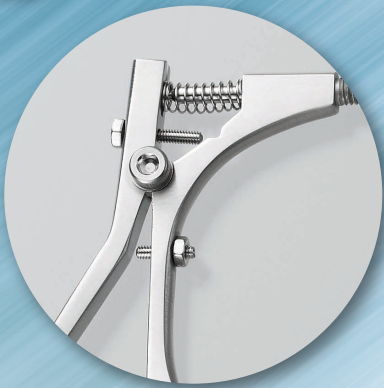

ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる過度のストレスを抑えるため、壊れにくい構造です。

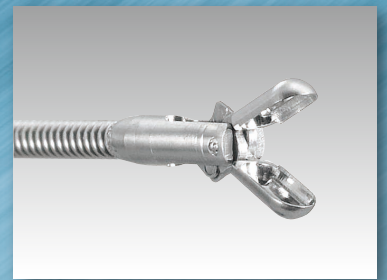

生検鉗子「セルメンSE1.5」



把持鉗子「セルメンHK1.2」



コデン株式会社

フレキシブル鉗子「セルメン」

細いのにフレキシブルに曲げて確実に患部をとらえます！

ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる
過度のストレスを抑えるため、**先端部は壊れにくい構造です。**

- ワイヤー部径1.2mmの細さにもかかわらず、確かな把持力と採取力があります。
- ワイヤー部がフレキシブル構造になっているので、操作性が良好です。
- 動物の外耳から鼓膜、口腔、鼻に直接または鉗子挿入器具を使用し異物を把持、もしくは組織採取ができます。
- 耐熱性素材のため鉗子全体をオートクレーブ滅菌可能です。



商 品 名	セルメンHK1.2, セルメンHK1.2-S, セルメンSE1.5 希望小売価格：各110,000円(税別)	
サ イ ズ	セルメンHK1.2 362mm(全長)×102 mm(幅)×1.2mm(ワイヤー部径)×39g(重量)	セルメンSE1.5 230mm(全長)×102 mm(幅)×1.2mm(ワイヤー部径)×37g(重量)
材 質	先端部・ワイヤー部・ハンドル部：ステンレス製, 根元補強：耐熱樹脂	
耐 熱 性	135℃, オートクレーブ滅菌可能	
動物用医療機器 届 出 番 号	把持鉗子セルメンHK1.2	：4動薬第938号
	把持鉗子セルメンHK1.2-S	：4動薬第938号
	生検鉗子セルメンSE1.5	：2動薬第210号

※品目、製品情報、製品仕様、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
詳細については弊社製品取扱販売店へご確認ください。



コデン株式会社

www.Coden.co.jp
info@coden.co.jp

東京都豊島区巣鴨1丁目4番16号
TEL. 03-5981-8611 FAX. 03-5981-8878